

NORIKS Bunion Fix — korektor za burzitis palca

Postopno poravnavanje palca s 30 minutami do 3 ure dnevno.

Velikost	Univerzalna — ustreza vsem velikostim stopala
Stran	Isti korektor za levo in desno stopalo
Podloga	Mehka notranja podloga, ki ščiti kožo
Nastavljanje	Elastični trakovi z nastavljivim raztezanjem
Priporočeno	Od 30 minut do 3 ure dnevno



V PAKETU

- 1 korektor za burzitis palca
- Elastični trakovi za nastavljanje


HITER ZAČETEK

1. Korektor namestite tako, da blazinica leži ob izbočeni kosti, zanka pa objame palec.
2. Trak zategnite le toliko, da začutite rahel razteg — nikoli do bolečine.
3. Prvi teden nosite 30 minut dnevno, nato postopoma podaljšujte.

1. Nameščanje

- 1 Sedite in stopalo naslonite tako, da so prsti sproščeni.
- 2 Palec potisnite skozi zanko, dokler blazinica ne nalega ob izbočeno kost ob strani stopala.
- 3 Trak napeljite okrog sredine stopala in ga zategnite le toliko, da začutite rahel razteg.
- 4 Preverite, da blazinica leži ravno, brez gub, in da trak ne stiska vrha stopala.
- 5 Palec mora biti povlečen navzven, vendar brez napetosti, ki povzroča bolečino.

**Udobno, prilagodljivo
i lako za nošenje kod kuće**

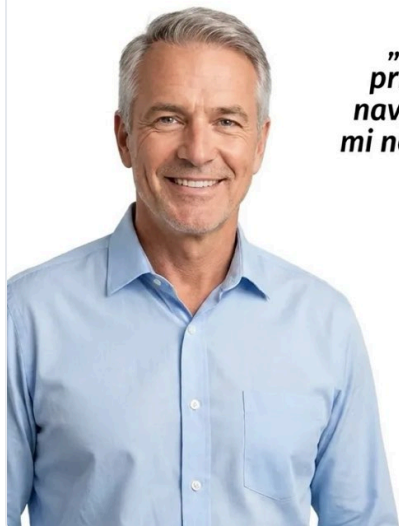

*„Mekan je i lako se
prilagodi. Stavim ga
navečer uz TV i uopće
mi ne smeta — zato ga
nosim redovno.“*

Marko Horvat
Korisnik Noriks Bunion Fixa



Korektor objame palec in razbremeni izbočeno kost.

Zašto je Noriks drugačiji:



Napredna terapija
poravnanja



Patentirani
zglobni mehanizam



Podesivo
rastezanje



Meko jastučje
za čukalji



Vrhunski izdržljivi
materijali



Bezbolno
poravnanje

Cilj je postopno vraćanje palca v pravilnejši položaj.

2. Načrt nošenja

Obdobje	Dnevno	Kdaj
1. teden	30 minut	Zvečer, med sedenjem
2. teden	45 – 60 minut	Zvečer ali med počitkom
3. teden	1 – 2 uri	Razdeljeno na dve obdobji
Od 4. tedna	2 – 3 ure	V enem ali dveh obdobjih, glede na udobje

Redno nošenje je pomembnejše od dolžine. Trideset minut vsak dan da boljši rezultat kot tri ure enkrat na teden.

3. Kaj lahko pričakujete

- Prvih nekaj dni: občutek raztega in razbremenitve po odstranitvi korektorja.
- Po približno dveh tednih doslednega nošenja: manjše nelagodje pri hoji in stanju.
- Po približno mesecu dni: opaznejša sprememba v položaju palca.
- Korektor deluje, dokler ga nosite, in ob redni uporabi — ni enkratna rešitev.

4. Reševanje težav

Kaj se dogaja	Vzrok	Rešitev
Bolečina med nošenjem	Trak premočno zategnjen	Popustite trak; občutek mora biti razteg, nikoli bolečina
Korektor zdrsne s palca	Trak prešibko zategnjen ali vlažna koža	Osušite stopalo in trak zategnite za eno stopnjo
Rdečina na koži	Guba na podlogi ali predolgo nošenje na začetku	Poravnajte podlogo in skrajšajte čas nošenja na 30 minut

5. Čiščenje

- Obrišite z vlažno krpo in blagim milom, sperite in posušite na zraku.
- Ne perite v pralnem stroju in ne sušite na radiatorju — elastika izgubi napetost.

Korektorja ne nosite čez odprto rano ali vneto kožo. Pri sladkorni bolezni, zmanjšanem občutku v stopalu ali močni, trajni bolečini se najprej posvetujte z zdravnikom.

6. Garancija, zamenjava in vračilo

- Vračilo ali zamenjavo lahko zahtevate v 30 dneh od dostave.
- Izdelek mora biti nerabljen, nepran in v izvorni embalaži, priložen mora biti račun.
- Stroške povratne pošiljke krije kupec, razen če je izdelek prispel poškodovan ali je bil poslan napačen artikel.
- Denar vrnemo na PayPal ali IBAN, v 3 do 5 delovnih dneh od prejema pošiljke.
- Za vračilo ali zamenjavo pišite na info@noriks.com in navedite številko naročila.

Če izdelek prispe poškodovan ali z napako v izdelavi, nam takoj sporočite — tak primer rešimo brez stroškov za vas.

Bunion Fix je vsakodnevna opora, ne zdravljenje. Ne postavlja diagnoze in ne nadomešča nasveta zdravnika. Če težave trajajo, se stopnjujejo ali se pojavijo po poškodbi, se obrnite na zdravnika.