


NORIKS kompresijske nogavice z zadrگو

Stopnjevana kompresija 15–20 mmHg s stransko zadrگو.

Kompresija	15 – 20 mmHg, stopnjevana (najmočnejša na gležnju)
Zadrگو	Stranska zadrگو z zaščitno notranjo podlogo
Velikosti	S/M, L/XL, 2XL — glede na obseg meč
Nošenje	Čez dan, do 12 ur
Pranje	Ročno v hladni vodi ali program za občutljivo perilo

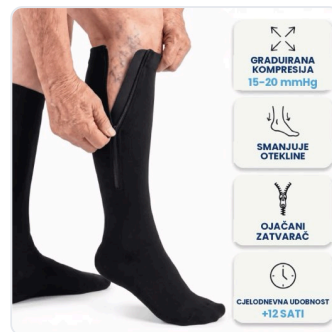

V PAKETU

- 1 par kompresijskih nogavic (glede na izbrani paket)

HITER ZAČETEK

1. Izmerite obseg meč na najširšem mestu in izberite velikost iz razpredelnice.
2. Nogavice obujte zjutraj, preden noge otečejo, sede.
3. Zadrگو zapirajte od gležnja navzgor in tkanino držite ob nogi.

1. Izbira velikosti

Velikost	Obseg meč	Številka obutve
S/M	23 – 36 cm	36 – 40
L/XL	36 – 45 cm	40 – 44
2XL	45 – 56 cm	44 – 48

Velikost izberite glede na **obseg meč**, ne po številki obutve. Merite zjutraj, na najširšem mestu meč, s sproščeno nogo. Če ste na meji dveh razponov, vzemite večjo številko.

2. Obuvanje

- 1 Sedite in zadrگو odprite do konca.
- 2 Nogavico povlecite čez stopalo tako, da peta sede v zanjo oblikovani del.
- 3 Nogavico poravnajte ob meča brez ene same gube — gube ustvarijo točke pritiska.
- 4 Z eno roko pritisnite tkanino ob nogo, da zaščitna podlogo ostane med zadrگو in kožo, z drugo počasi zaprite zadrگو od gležnja navzgor.
- 5 Preverite, da se zgornji rob ne zvija in ne reže v koleno.

**VIŠE OD 5.200
ZADOVOLJNIH KUPACA**



Monika S.

"Godinama sam svake večeri imala otečene gležnjeve. Otkako nosim Noriks, ponovno su normalni. Čak mogu opet obuti cipele koje 3 godine nisam nosila. Muž kaže da opet hodam kao prije."



Verificirana recenzija

Zadruga olajša obuvanje brez napenjanja.



Stopnjevana kompresija: najmočnejša na gležnju, šibkejša proti kolenu.

3. Kako dolgo nositi

- Obujte jih zjutraj in nosite čez dan — do približno 12 ur.
- Pred spanjem jih slecite, razen če vam zdravnik ni določil drugače.
- Pri dolgem stanju, sedenju ali potovanju jih nosite ves čas dejavnosti.
- Prvih nekaj dni se kompresija lahko zdi nenavadna — začnite z 2 do 3 urami dnevno.

4. Reševanje težav

Kaj se dogaja	Vzrok	Rešitev
Zadruga se sama odpira	Tkanina je povlečena navzdol ali je obseg pri zgornji meji	Pred zapiranjem nogavico povlecite višje ob meča; če se ponavlja, vzemite večjo številko
Zadrge ne morem zapreti	Premajhna velikost ali otekla noga	Obuvajte zjutraj; če tudi tedaj ne gre, zamenjajte za večjo številko
Mravljinici, hladni ali blede prsti	Premočna kompresija ali guba, ki stiska	Nogavico takoj slecite, jo poravnajte in znova obujte; če se ponavlja, se oglasite pri zdravniku
Nogavica drsi navzdol	Obseg meč pri spodnji meji razpona	Vzemite manjšo številko
Rdeče sledi na koži	Guba ali premočno zategnjen zgornji rob	Poravnajte tkanino; rahel odtis pletiva je normalen, globoko vtisnjena sled ni

5. Pranje in nega

- Perite ročno v hladni vodi ali v stroju na programu za občutljivo perilo, z **zaprto zadrugo** in v mrežasti vrečki.
- Brez belila in mehčalca — poškodujeta elastična vlakna, ki ustvarjajo kompresijo.
- Sušite na zraku, položeno. Ne v sušilnem stroju, ne na radiatorju ali soncu.
- Zadrugo občasno obrišite z vlažno krpo, da v njej ne ostanejo vlakna.

- Ob vsakodnevnom nošenju par zamenjajte približno vsakih 6 mesecev — kompresija sčasoma popušča.

Pred nošenjem se posvetujte z zdravnikom, če imate periferno arterijsko bolezen, odprte rane, akutno vnetje kože, diabetične spremembe na stopalu ali globoko vensko trombozo.

6. Garancija, zamenjava in vračilo

- Vračilo ali zamenjavo lahko zahtevate v 30 dneh od dostave.
- Izdelek mora biti nerabljen, nepran in v izvorni embalaži, priložen mora biti račun.
- Stroške povratne pošiljke krije kupec, razen če je izdelek prispel poškodovan ali je bil poslan napačen artikel.
- Denar vrnemo na PayPal ali IBAN, v 3 do 5 delovnih dneh od prejema pošiljke.
- Za vračilo ali zamenjavo pišite na info@noriks.com in navedite številko naročila.

Če izdelek prispe poškodovan ali z napako v izdelavi, nam takoj sporočite — tak primer rešimo brez stroškov za vas.

Kompresijske nogavice so vsakodnevna opora, ne zdravljenje. Ne postavljajo diagnoze in ne nadomeščajo nasveta zdravnika. Če težave trajajo, se stopnjujejo ali se pojavijo po poškodbi, se obrnite na zdravnika.