

NORIKS ErgoSit — ortopedska blazina za sedenje

Izrez za trtico in spominska pena visoke gostote za dolgo sedenje.

Pena	Spominska pena OrthoFlex visoke gostote
Certifikat	OEKO-TEX®, nestrupeno
Oblika	Izrez za trtico, konturirana opora za boke in hrbtenico
Prevleka	Snemljiva, pralna v pralnem stroju
Uporaba	Pisarniški stol, avtomobil, potovanja



V PAKETU

- 1 blazina ErgoSit
- Snemljiva pralna prevleka

HITER ZAČETEK

1. Blazino vzemite iz embalaže in jo pustite 24 ur, da pena dobi polno obliko.
2. Postavite jo na stol tako, da je izrez zadaj, pod trtico.
3. Sedite do konca nazaj, stopala ravno na tleh.

1. Pred prvo uporabo

- Blazina je med prevozom stisnjena — po odstranitvi embalaže jo pustite 24 ur pri sobni temperaturi. V tem času jo večkrat pregnetite z rokami in stresite, da se pena porazdeli.
- Vonj nove pene izgine po nekaj urah zračenja.


2. Pravilna namestitvev

- 1 Blazino položite na sedež tako, da je **izrez zadaj** — pod trtico, ne spredaj.
- 2 Ravni del blazine mora v celoti ležati na sedežu, brez prevešanja čez rob.
- 3 Sedite do konca nazaj, tako da se hrbet dotika naslonjala.
- 4 Višino stola nastavite tako, da so kolena v višini bokov ali malo nižje, stopala pa ravno na tleh.



Vozite diljem zemlje bez bolova
Testirali i odobrili vozači kamiona

Izrez odstrani neposreden pritisk na trtico.

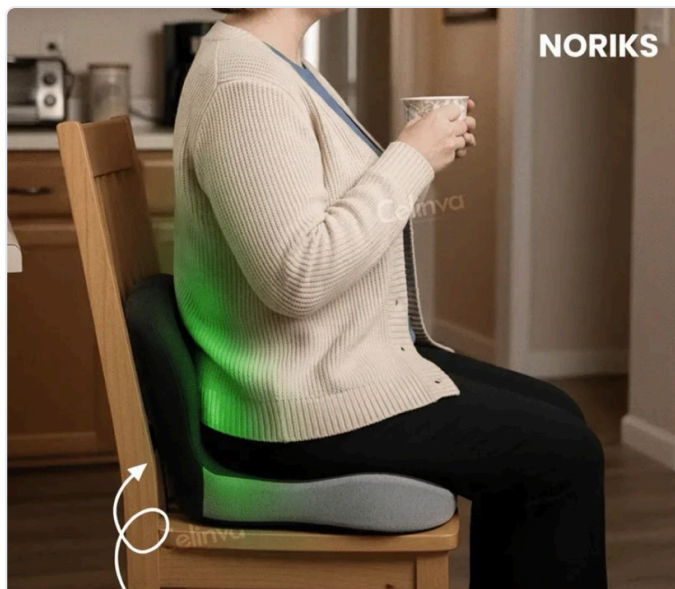

Automatski **ispravlja**
vaše **držanje**

Konturirana oblika enakomerno porazdeli težo po bokih.

3. Vsakodnevna uporaba

- Blazina je namenjena vsakodnevni uporabi — v pisarni, avtomobilu in na potovanjih.
- Tudi z blazino vstanite in prehodite nekaj minut vsako uro.
- Ne uporabljajte je na zelo mehkih ali neravnih podlagah — opora se izgubi.

4. Reševanje težav

Kaj se dogaja	Vzrok	Rešitev
Blazina drsi po stolu	Gladka prevleka sedeža	Prevleko obrnite s protizdrsno stranjo navzdol; na usnjenih stoli podložite tanko podlago
Pritisk na trtico je še vedno prisoten	Izrez obrnjen naprej	Blazino obrnite — izrez gre zadaj
Pena se zdi trda	Hladen prostor	Spominska pena se pri telesni temperaturi zmehča v nekaj minutah
Blazina je previsoka za mizo	Nenastavljena višina stola	Stol spustite za višino blazine

5. Pranje in nega

- Prevleko snemite in perite v pralnem stroju pri 30 °C, na programu za občutljivo perilo.
- **Pene nikoli ne perite v pralnem stroju in je ne potaplajte v vodo.** Madeže obrišite z vlažno krpo in pustite, da se posuši na zraku.
- Pene ne sušite na radiatorju ali neposrednem soncu.
- Blazine ne hranite stisnjene pod bremenom — pena ohrani obliko le, če je razbremenjena.

6. Garancija, zamenjava in vračilo

- Vračilo ali zamenjavo lahko zahtevate v 30 dneh od dostave.

- Izdelek mora biti nerabljen, nepran in v izvirni embalaži, priložen mora biti račun.
- Stroške povratne pošiljke krije kupec, razen če je izdelek prispel poškodovan ali je bil poslan napačen artikel.
- Denar vrnemo na PayPal ali IBAN, v 3 do 5 delovnih dneh od prejema pošiljke.
- Za vračilo ali zamenjavo pišite na info@noriks.com in navedite številko naročila.

Če izdelek prispe poškodovan ali z napako v izdelavi, nam takoj sporočite — tak primer rešimo brez stroškov za vas.

ErgoSit je blazina za vsakodnevno oporo pri sedenju, ne zdravljenje. Ne postavlja diagnoze in ne nadomešča nasveta zdravnika. Če težave trajajo, se stopnjujejo ali se pojavijo po poškodbi, se obrnite na zdravnika.